




¿Cómo se limpia una dentadura postiza paso a paso?

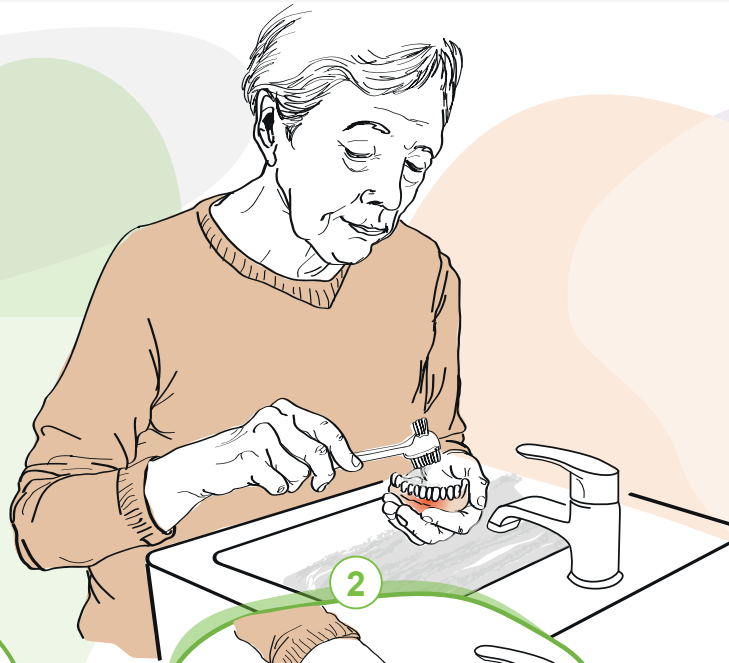


1. Lavarse las manos y colocar una toalla doblada sobre el lavabo o llenar este con un poco de agua, para evitar el riesgo de rotura en caso de que la dentadura se caiga.

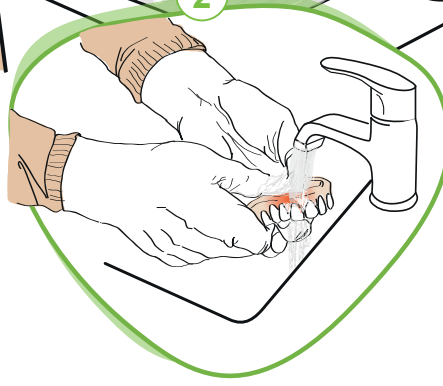


2. Retirar la prótesis con cuidado y dejar correr un poco de agua templada, nunca muy caliente, sobre ella, para eliminar restos de comida y otras partículas.

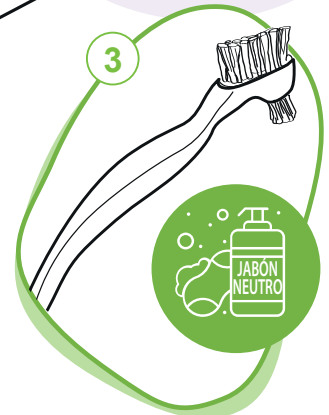

3. Frotar todas sus partes con un cepillo de cabeza pequeña y cerdas suaves o con uno específico y jabón suave/ neutro o un limpiador también específico.

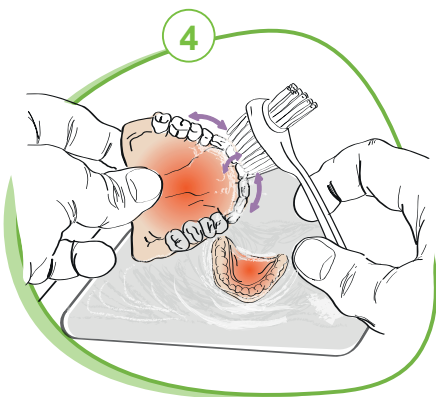

4. El cepillado debe realizarse por todas las caras del diente y con suavidad. En caso de usar adhesivo, limpiar las ranuras de ajuste a las encías para eliminar sus restos.

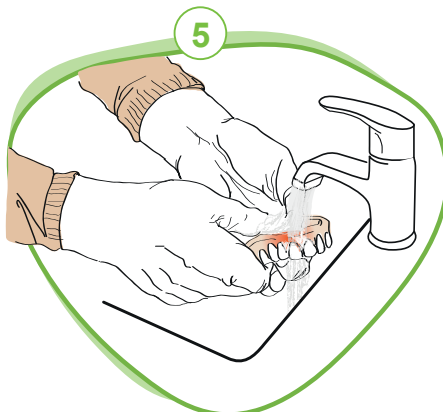

5. Aclarar la prótesis para eliminar rastros del limpiador.



6. Antes de volver a ponerse la dentadura, también debe realizarse una correcta higiene de la boca con un cepillo de dientes de cerdas suaves, así como retirar posibles restos de adhesivo dental que queden en las encías.

Si no es posible realizar una limpieza profunda después de cada comida, conviene al menos extraer la dentadura para aclararla y enjuagar la boca.